


MuscleGun

BODY PIXEL


User's Manual

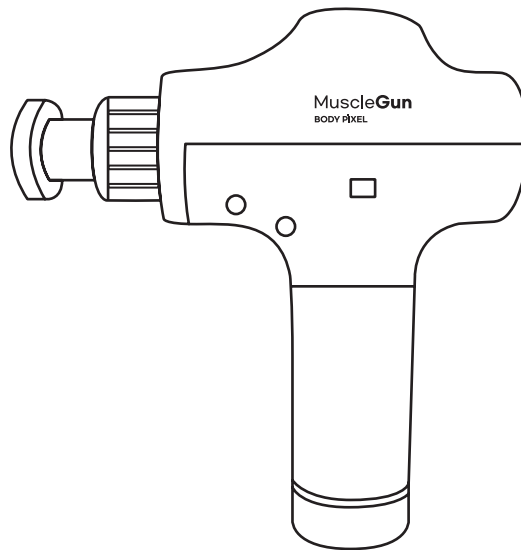

bodypixel.jp

基本構成

ボディピクセル マッスルガンは、専門家から好評を受けている最先端技術の無線振動マサージガンです。1分間3300 (RPM) 回振動し、激しい運動後の、軽い運動を目的とした商品です。

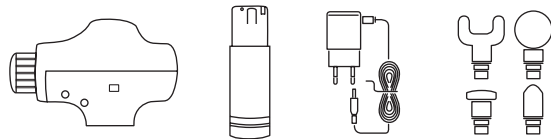


ボディピクセルマッスルガン本体 × 1
バッテリー × 1

充電アダプタ × 1
チップ × 4


各部名称

A. 本体名称

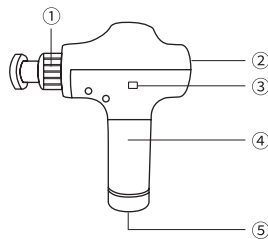


- ① チップ接続部
- ② ディスプレイ
- ③ バッテリー着脱ボタン
- ④ リチウムイオン電池
- ⑤ 底面

B. 操作部名称

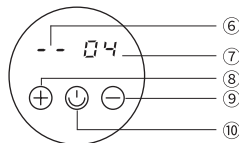


- ⑥ 強さ (1~20)
- ⑦ バッテリー残量 (1~10)
- ⑧ 振動のレベル ↑
- ⑨ 振動のレベル ↓
- ⑩ 電源ボタン

C. 底面名称

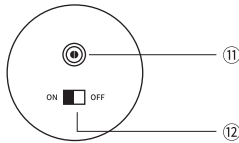


- ⑪ 充電接続部
- ⑫ 本体電源ON/OFFスイッチ


ボディピクセルマッスルガンの操作方法

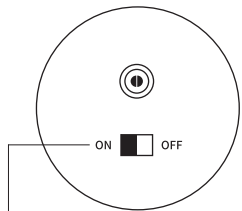


バッテリーの底面の電源スイッチを入れる。

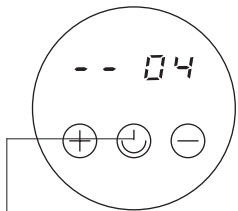

電源ボタンをタッチするとデバイスが作動する。

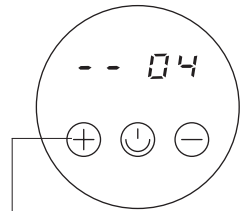

+ ボタンや - ボタンを押して振動の強弱を調整する。

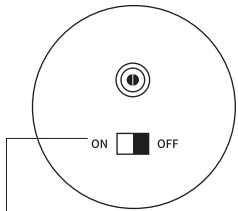


使用後は本体の底面の電源スイッチを切る。

ボディピクセルマッスルガンのRPMレベル

1レベル	1200 RPM	11レベル	2400 RPM
2レベル	1300 RPM	12レベル	2500 RPM
3レベル	1400 RPM	13レベル	2600 RPM
4レベル	1500 RPM	14レベル	2700 RPM
5レベル	1600 RPM	15レベル	2800 RPM
6レベル	1700 RPM	16レベル	2900 RPM
7レベル	1800 RPM	17レベル	3000 RPM
8レベル	1900 RPM	18レベル	3100 RPM
9レベル	2000 RPM	19レベル	3200 RPM
10レベル	2100 RPM	20レベル	3300 RPM

ボディピクセルマッスルガンのチップの名称

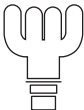				追加オプション 
フラット	スパイラル	ダブルフォーク	ラウンドボール	ラウンドクッションボール
全身 ――	腰、脇腹、足裏、手のひら ――	背骨、腕、足首～ふくらはぎ ――	僧帽筋、肩、骨盤、肩甲骨の周辺 ――	僧帽筋、肩、太ももや腕の内側 ――
全身に使用可能な最もポピュラーなヘッド	1つのポイントで局部に適する	2つのポイントで痛い部位の周辺に	ソフトな使用感で、骨と近い部分に適するヘッド	ソフト感をより高めた二重クッション
追加オプション 	追加オプション 	追加オプション 	追加オプション 	追加オプション 
クワッドフォーク	ラウンドフラット	クワッドパドル	カーブドット	フィンガー
背骨、腕、腰 ――	全身 ――	脇腹、太もも、ふくらはぎ ――	太もも、腕、ふくらはぎ ――	腰、脇腹、足裏、手のひら ――
4つのポイントで痛い部位の周辺に	全身に使用可能。ヘッドがラウンドしている分、ラインに合わせる事ができます	ヘッドを皮膚と平行にし、引き寄せる感じで使用してください。	筋肉を全体的に揺らす。曲面の筋肉に適する	体全体のポイントに使用可能

ライセンス認証QRコード

本製品はご購入日から1年の無料アフターサービスを受けることが出来ますが、ライセンス認証をされていない機器はこの無料アフターサービスをお受けすることはできません。ご購入頂きましたらすぐにパッケージのライセンス認証ステッカーのシリアル番号を確認後、サイトに接続してライセンス認証をお願いします。

※ただし、お客様の過失・故意による機器損傷や改造による故障の場合はこの限りではありません。



ボディピクセルマッスルガン使用上の注意事項

1. 本製品には防水機能がありませんのでお風呂など湿気の多い場所でのご使用は控えてください。また、液体や火元から離れてのご使用をお願いします。
2. 通気口に物を入れないでください。ほこりや異物が入らないようにご注意ください
3. 子供の手の届かないところに保管してください。
4. 本製品（本体、バッテリー、ヘッドなど）は、他社製品のパーツ等を使用することはできません。任意に他社製品との組み合わせ、あるいは改変・改造の使用が原因で生じるトラブルについては責任を負いません。
5. 充電アダプターは、パッケージに含まれている本製品付属のものをご使用ください。
6. 素肌に直接使う場合、振動摩擦により皮膚が赤くなることがありますが、一時的な現象です。
7. ご使用の際、指や髪の毛などが挟まれないようにご注意ください。
8. 本製品は医療機器ではありませんので、治療目的でのご使用はできません。

よくある質問 (FAQ)

1. ボディピクセルマッスルガンのバッテリー残量はどのように分かりますか？

製品の操作部のLEDディスプレイの1から10の数字、もしくはバッテリーの底部の表示を確認してください。

緑はバッテリー残量10%以上
赤はバッテリー残量 10%未満

2. バッテリーの寿命はどのぐらいですか？

バッテリーの保証寿命は6カ月です。

3. フル充電までの時間はどのぐらいかかりますか？また、連続で使う場合、どのぐらい使用できますか？

ボディピクセル マッスルガンのバッテリー容量は、2,400mAh（ミリアンペアアワー）です。充電時間は2～3時間で、1度フル充電すると3～4時間使えます。

1回の充電で、2～3時間程度使用可能です。

4. 日常生活防水ができますか？

ボディピクセルマッスルガンは、日常生活防水ができない製品ですので、水に入れないでください。さらに、水気のある場所での保管の場合、故障の原因になりますのでご注意ください。

品質保証書

製品名		モデル名	
購入日		保証期間	
お名前		販売店	

本製品は徹底した品質管理および検査を経て製造された製品です。
下記に記載されている内容で品質を保証いたします。

株式会社クライムアップ
639-1001 奈良県大和郡山市九条町478-11
カスタマーセンター：080-4231-0250

SPEC

製品名	ボディピクセルマッスルガン
構成品	本体・バッテリー・チップ4種・充電アダプター・取扱説明書
保証期間	購入日から1年（バッテリーは6カ月）
アダプター入力定格電圧	100-240V～ 50/60Hz 0.5A
アダプター出力定格電圧	16.8V 0.6A
製造者	Zhejiang Ruicheng Mechanical Power Co., Ltd
生産国	中国
製造年月	別途表示
モデル名	BodyPixel MuscleGUN / BIU004
供給者	株式会社クライムアップ
お問い合わせ	080-4231-0250